


採取容器の種類（微生物検査）

2025年2月更新



50cc滅菌スクリーコップ

- ・添加物：なし
- ・材料：喀痰（一般菌）、ガーゼ、組織、便（抗酸菌）など

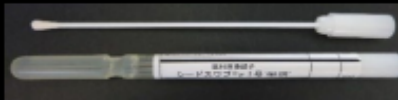

シードスワブγ1号（白）

- ・添加物：キャリーブレア培地
- ・材料：便（一般菌）



シードスワブγ2号（橙）

- ・シードスワブγ3号より細い綿棒で、用途に合わせて採取しやすいほうを選択する。
- ・添加物：変法アミーズ培地
- ・材料：口腔内、鼻腔、耳漏、眼、膿、尿道、膺分泌物など



シードスワブγ3号（青）

- ・シードスワブγ2号より太い綿棒で、用途に合わせて採取しやすいほうを選択する。
- ・添加物：変法アミーズ培地
- ・材料：口腔内、鼻腔、耳漏、眼、膿、尿道、膺分泌物など



滅菌スクリースピッツ

- ・ 添加物：なし
- ・ 材料：尿、胆汁、腹水、髄液、カテ先、尿中抗原迅速検査など



嫌気ポーターII

- ・ 添加物：インジケーター付き寒天
- ・ 材料：膿汁など



血液培養ボトル（嫌気、好気）

- ・ 添加物：血液培養液、抗菌薬吸着レズン
- ・ 橙（嫌気ボトル）、青（好気ボトル）、桃（小児用好気ボトル）
- ・ 採血量は、成人8～10mL、小児0.5～5mL。



喀痰処理器

- ・ 添加物：なし
- ・ 材料：喀痰（抗酸菌）



専用ボトル

- ・ 添加物：血液培養液
- ・ 採取量：1mL～5mL
- ・ ガラス製（取扱注意）
- ・ 材料：血液（抗酸菌）、骨髓液（抗酸菌）




滅菌容器（青）

- ・ 添加物：なし
- ・ 検体が分けられない場合、一般菌と抗酸菌は同じ検体で検査可能。
- ・ 材料：気管支洗浄液



咽頭・角結膜用滅菌綿棒

- ・ 添加物：なし
- ・ 材料：A 群迅速検査

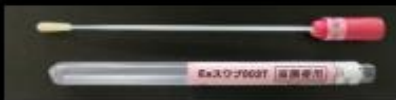

直腸スワブ

- ・ 添加物：なし
- ・ 材料：ノロ迅速検査



鼻腔用スワブ

- ・ 添加物：なし
- ・ 材料：インフルエンザウイルス迅速検査
SARS-Cov2+インフルエンザウイルス迅速検査



無滅菌Lサジキャップ

- ・ 添加物：なし
- ・ 便量は母指大必要である。（スワブ不可）
- ・ 材料：クロストトキシン、ロタウイルス・赤痢アメーバ抗原迅速検査



ユニットランズ-RT

- ・ 添加物：ユニットランズ-RT液相培地
- ・ 材料：呼吸器 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV2を含む）